

POSTUP PŘI ODBĚRU KRVE NA TEST NIPT


S pacientkou, která má o toto vyšetření zájem, je nutné vyplnit žádanku a vyplnit a podepsat informovaný souhlas s genetickými testy. Jeden výtisk informovaného souhlasu dostane pacientka a druhý se odešle společně se vzorky do společnosti Genetika Plzeň. Pacientka musí být informována o typu testu, způsobu jeho vyhodnocení a jeho omezeních.

1. ODBĚR KRVE

Odběr krve se provádí do 2 zkumavek „Streck cell-free DNA BCT“ (10ml), které jsou součástí odběrového setu NIPT.

Na zkumavku napište jméno pacientky, číslo pojištěnce a datum odběru.

Po odběru krve je nutné zkumavku 10x obrátit o 180° (viz obrázek) a skladovat ji při pokojové teplotě.

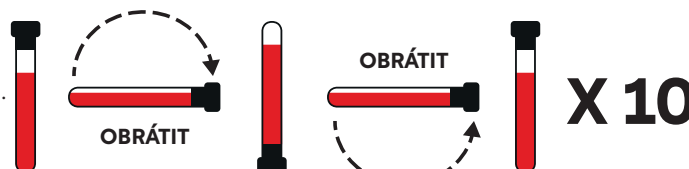

2. TRANSPORT



Během transportu udržujte teplotu 10 – 25 °C. Ke každému vzorku přiložte originál podepsaného informovaného souhlasu a vyplněnou žádanku. Zkumavku s krví je vhodné odeslat v den odběru. Krev musí být zpracována v laboratoři Genetika Plzeň nejpozději do 45 hodin po odběru. Doporučujeme odběr provádět v dopoledních hodinách ve dnech pondělí až čtvrtek.

3. OBJEDNÁNÍ TRANSPORTU



Dopravu objednávejte nejlépe den před odběrem.
Při objednání přepravy zdůrazněte,
že se jedná o neinfekční biologický materiál.



Adresa:
Genetika Plzeň, s.r.o.
Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň – Černice
Telefon: +420 377 241 529



Kontaktní osoba:
Bc. Matiásková Hana
Telefon: +420 731 433 568

4. VÝSLEDEK



Výsledek testu bude zaslán na uvedenou adresu na žádance nejpozději do 3 týdnů od přijetí vzorku laboratoří a po zaplacení testu.

5. MÁTE DOTAZ?



V případě jakýchkoliv dotazů a objednání nových odběrových kitů nás můžete kontaktovat:
recepce@genetika-plzen.cz | Bc. Matiásková Hana, tel.: +420 731 433 568